

# OraLight

OraLight este o sursa de lumina revolutionara, care permite iluminarea totala si eficienta a cavitatii bucale din interior. Este mic, aproape lipsit de greutate, "hands free" si extrem de simplu de folosit.

OraLight se monteaza cu usurinta pe tubul de aspiratie sau pe aspiratorul de saliva, ramanand acolo pe toata durata de tratament a pacientului.

Spre deosebire de alte surse de lumina, OraLight ilumineaza cavitatea bucala din interior, asigurand ca mainile doctorului si instrumentarul sa nu blocheze calea luminii. De asemenea previne reflectia luminii dinspre dinti.

Unghiul de iluminare este unic, contribuind astfel la prevenirea zonelor intunecate.


OraLight consta in trei parti, o sursa de lumina, care se monteaza pe tubul de aspiratie sau pe aspiratorul de saliva ( OraLight este disponibil in patru dimensiuni ), un acumulator ( care genereaza corect si eficient energia ), si un incarcator.

Este usor de detasat in urma tratamentului si poate fi curatat in autoclav.

## Specification

- ✔ Light intensity - approx 2500 ft-candles
- ✔ Light life - approx 50k hrs
- ✔ Autoclavable - yes
- ✔ Working duration - endless, power socket driven

OrbO  
on the  
suction  
tube

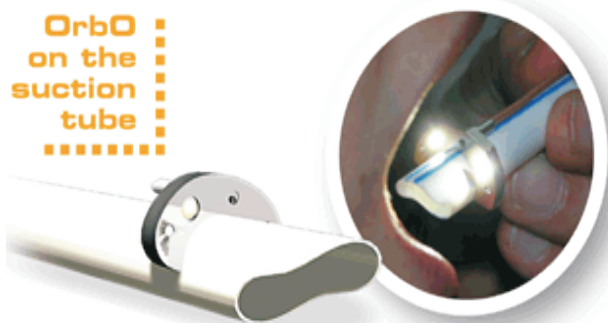

High brightness  
power LEDs



## YTS Dental SRL

Str. Mihail Sebastian Nr. 141, Bl. V73, Sc. 1, Et. 2, Ap. 11, Bucuresti, Sector 5, Romania  
Tel/Fax : +40 21 411 93 47, Mobil : +40 723 791 340  
Mail : office@yts-dental.ro